
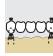





Mode d'emploi

## Alliage dentaire céramo-métallique à haute teneur en or, extra-dur, jaune, exempt de palladium, type 4

### Utilisation

Pour tous travaux céramo-métalliques et travaux conventionnels, technique or-résine, ponts, couronnes, travaux fraisés.

- |   |  |
|---|--|
| a  Inlays, onlays, couronnes <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | d  Bridges de longue portée |
| b  Couronnes unitaires                                   | e  Travaux fraisés          |
| c  Bridges de courte portée                              |  |

### Propriétés physiques

Composition en % du poids

Au + métaux spécifiés du groupe du platine	97.85
Au	85.90
Pt	11.70
Ir	0.05
Rh	0.20
In	0.10
Fe	0.05
Mn	0.10
Nb	0.40
Zn	1.50
Densité g/cm <sup>3</sup>	18.8
Intervalle de fusion °C	1025–1190
CET (25–500°C) 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	14.3
(25–600°C) 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	14.5
Module d'élasticité GPa *	80

### Propriétés mécaniques

	1	2	3
Dureté HV5 *	185	205	210
Limite d'élasticité 0.2 %, Rp 0.2 % MPa *		540	580
Allongement A5 % *		6	6

### Etat

1	après coulée
2	après cuisson
3	durci

### Brasures avant cuisson

S.G 1030 990–1030°C

### Intervalle de fusion

### Brasures après cuisson

S.G 750 695–750°C

### Intervalle de fusion

\* Ces indications sont des valeurs moyennes de mesures obtenues sous des conditions exactement définies et standardisées. Des différences de ± 10 % sont possibles et normales.

### Remarque à l'attention du prescripteur (contre-indication)

Certains de ses composants ont été décrits comme allergisants dans de rares cas par la littérature spécialisée. Il appartient donc au praticien de se prononcer en fonction de la sensibilité du patient.

### Biocompatibilité et résistance à la corrosion

V-Gnathos® Plus a été soumis aux tests suivants:

**Résistance à la corrosion** selon un protocole basé sur la norme ISO 22674.

**Cytotoxicité** conforme à la norme ISO 10993-5.

**Sensibilisation** conforme à la norme ISO 10993-10.

**Mutagenicité** (AMES) conforme à la norme ISO 10993-3.

L'alliage est considéré comme ayant une très haute résistance à la corrosion. Il n'a montré aucun potentiel cytotoxique et n'a pas provoqué de sensation allergique.

Année de lancement 1995

V-Gnathos® Plus est conforme à la norme EN ISO 22674 / EN ISO 9693

V-Gnathos® Plus a été fabriqué conformément aux normes d'Assurance qualité ISO 9001 / ISO 13485.

Rx only

Les produits portent le sigle CE.  
Informations détaillées voir emballage.

## Recommandation

Des connections de **10 mm<sup>2</sup>** améliorent la stabilité thermique des armatures.

## Modelage

Utiliser les procédés habituels. Des parois des éléments plus épaisses et des connexions plus massives améliorent la stabilité thermique des armatures.

## Alimentation

Utiliser des tiges de coulée en cire (**Ø 3.5 mm**) en ayant recours aux systèmes d'alimentation directe ou indirecte avec barre stabilisatrice (**Ø 5 mm**). Il est conseillé pour les raccords conduisant aux éléments intermédiaires un diamètre de **4 mm**. Prévoir des événements (env. **Ø 1 mm**) pour améliorer la qualité des coulées de couronnes ou de ponts massifs. Les maquettes en cire sont à positionner en dehors du centre thermique, c'est-à-dire à proximité de la paroi du cylindre et à env. **5 mm** de son extrémité. Pour les unitaires et les ponts jusqu'à 3 éléments, il est recommandé d'utiliser des volants en cire qui permettent d'obtenir un positionnement idéal dans le cylindre et par conséquent un refroidissement approprié des pièces coulées.

## Mise en revêtement

Tapisser l'intérieur du cylindre métallique avec du papier ignifugé (substitué à l'amiante). Utiliser des revêtements recommandés pour la coulée des alliages conventionnels, tels que **Univest®Plus** ou **Univest®Rapid** (à liant phosphaté).

## Préchauffage

Se référer aux recommandations du fabricant du revêtement (temps de prise, paliers de chauffe, etc.). La température de préchauffage doit être stabilisée, selon la grandeur du cylindre, entre **20 et 45 minutes**.

Température de préchauffage: 750 °C

## Creusets

Un glaçage du creuset sera préalablement effectué en utilisant une petite quantité d'un flux recommandé (acide borique/Borax). Les creusets suivants peuvent être utilisés :

Creuset en céramique:                      Température de coulée 1390 °C

## Régénération des masselottes

Ajouter avec chaque fonte **1/3 d'alliage neuf** au minimum. Les masselottes de l'alliage réutilisé doivent être exemptes de tout résidu de fonte ou de particules de revêtement.

## Fonte

Fondre l'alliage avec les équipements habituels pour ce type d'alliage. Lors de la fonte à la flamme (par ex. avec le chalumeau **Meteor type « O »**), le réglage précis des pressions propane (env. **0.5 bar**) / oxygène (env. **1.0 bar**) est essentiel pour obtenir une flamme neutre (éviter l'excès de gaz). Saupoudrer l'alliage d'une petite prise de flux avant la fonte. Lorsque l'alliage est entièrement fondu, maintenir la flamme pendant env. **5 secondes** supplémentaires sur l'alliage en fusion. Un temps supplémentaire de env. **5 secondes** est également recommandé pour la fonte avec des installations à haute fréquence.

Flux: acide borique

## Refroidissement

Laisser refroidir lentement le moule à la température ambiante.

## Démoulage/Nettoyage

Par sablage en utilisant des billes de verre, de l'oxyde d'alumine pur (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) avec une grosseur de grain de **50 µm à 125 µm** et en fixant la pression de **1.5 à 2.0 bar**.

## Décapage

Décaper les éléments après coulée ou après brasage en déposant les éléments froids dans une solution chaude de **Desoxid** pendant **2 minutes** au minimum. – Desoxid I (75 %).

## Dégrossissage

Dégrossir les éléments en enlevant une légère couche avec des fraises extra-fines à denture étagée ou croisée. Le dégrossissage peut également s'effectuer avec des meulettes, ceci à basse vitesse. Les armatures sont sablées avant oxydation avec de l'oxyde d'alumine pur d'environ **110 µm**.

Meulettes recommandées: Cerasiv Brown (5'000–10'000 rpm)  
Pression de: 1.0–2.0 bar

## Nettoyage

Avant oxydation, nettoyer les éléments dans de l'eau distillée bouillante (**10 min.**), aux ultrasons (**5 min.**) ou au jet de vapeur.

## Dorage (Aurofilm® 2000)

L'application d'une couche de dorage avec Aurofilm est possible. Appliquer l'Aurofilm selon le mode d'emploi dans le four à céramique.

Température de cuisson: 920 °C–940 °C

## Oxydation

**10 min.** sous vide à 950 °C

Laisser ensuite refroidir à l'air. L'armature est alors de couleur gris-brun uniforme. Après l'oxydation, les éléments doivent être décapés pendant **10 minutes** dans une solution chaude, soit d'acide sulfurique dilué à 10 % (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), soit de **Desoxid 1**, solution à n'utiliser que pour cet alliage. Ensuite, bien nettoyer les éléments.

## Application de la céramique ou de la résine

L'application de la céramique, voir de la résine, s'effectue, selon les instructions du fabricant. L'alliage est compatible avec les masses traditionnelles (à haute fusion). Le refroidissement de l'armature après les cuissons s'effectue en fonction du coefficient d'expansion thermique et conformément aux instructions du fabricant de céramique. Pour toutes les masses d'opaque en pâte, il est recommandé un pré-séchage d'environ **10 minutes**.  
Température de pré-séchage: 300°C–400°C.

Après la première cuisson de la dentine, refroidir lentement les éléments de la température de cuisson:  
Refroidir jusqu'au 800°C

D'excellents résultats ont notamment été obtenus avec les porcelaines indiquées ci-après (dans l'ordre alphabétique), avec un refroidissement normal:  
Carat, Ceramco II, Creation &, dSign, Duceram, Duceram Plus, Finesse, MagicCeram, Omega 900, Vintage, Vita M 13

D'excellents résultats ont notamment été obtenus avec les porcelaines indiquées ci-après (dans l'ordre alphabétique), avec un refroidissement lent:  
Symbio Ceram

Chaque couronne d'un pont doit être soutenue par une tige de soutien. Un bloc de supports individuels est recommandé pour les ponts de longue portée.  
Température de cuisson max. de 950°C

## Brasage/Soudage au laser

Nous recommandons de braser avec un chalumeau propane/oxygène (**Meteor type «L»**) et **Fluxor**. Des lunettes à verres fumés permettent d'obtenir un meilleur contrôle du brasage. Confectionner le modèle à braser de manière à assurer une bonne stabilité. Un espace pour le joint du brasage de **0.1–0.2 mm** avec des parois les plus parallèles possibles renforce la bonne qualité du joint.

Fils pour soudage laser: LW n° 1

## Traitements thermiques

Autodurcissement par refroidissement lent après coulée  
Durcissement 450°C/15 min. – refroidir à l'air

## Polissage

Décaper la couche d'oxyde dans la solution chaude de **Desoxid**. Prépolir à l'aide d'un polissoir à gomme; puis polir avec une brosse douce, un feutre ou un polissoir en coton avec un mélange de **Legabril Diamond**. Pour obtenir le poli brillant final, utiliser une brosse douce ou un polissoir en coton avec un peu du blanc de Troyes mouillé à l'eau.