

# L1 Mode d'emploi

Alliages céramo-métalliques à haute teneur en or  
(Produits avec numéros de catalogue en annexe)

## Précautions d'emploi

Un mélange d'alliages différents ou de même type est interdit!

Porter des lunettes foncées et des gants de protection pendant la fonte.

Pendant le décapage, porter des lunettes et des gants de protection contre les giclures d'acide et éviter d'inhaler les vapeurs en portant un masque.

Pendant l'élaboration avec des instruments rotatifs, protéger vos yeux avec des lunettes, porter un masque de protection et travailler derrière une aspiration.

Ces nouvelles directives d'utilisation annulent et remplacent tous les modes d'emploi précédents.

Pour les dommages qui résultent de la non-observation du mode d'emploi suivant, le fabricant décline toute responsabilité.

## Utilisation conforme

Prothèse dentaire fixe et amovible.

## Description du produit

Les alliages céramo-métalliques à haute teneur en or (type 4 selon ISO 22674) se caractérisent par leur structure coulée à grains fins, une importante résistance à la corrosion, leur biocompatibilité et leur facilité de traitement. Au vu des importantes teneurs en métaux Au et Pt, les alliages de ce groupe peuvent être soudés sans problème ; ils conviennent aussi très bien à la coulée de raccord en cas d'utilisation d'éléments de construction préfabriqués pour des travaux combinés.

## Bénéfice clinique escompté

Restauration de la mastication et amélioration de l'aspect.

## Qualification

Les connaissances d'un dentiste et d'un technicien-dentiste professionnels sont requises. Le mode d'emploi doit être disponible en permanence et être lu en entier avant la première utilisation. La fabrication ne doit être réalisée que par du personnel technique qualifié. Veuillez vous adresser à votre représentant Cendres+Métaux pour tout renseignement ou obtenir de plus amples informations.

## Effets secondaires

Pour un patient allergique à un ou plusieurs éléments d'un alliage, cet alliage ne doit pas être utilisé. Pour un patient qui a le soupçon d'être allergique à un ou plusieurs éléments d'un alliage, on lui fera subir préalablement un test allergologique pour clarifier son incertitude et démontrer que l'on peut utiliser cet alliage s'il ne présente pas de réaction allergique.

## Historique des numéros de charge

Si pour la réalisation d'un travail on utilise de l'alliage provenant de charges différentes, tous les numéros de charges concernés doivent être mentionnés afin de garantir l'historique.

## Désinfection

Toutes les parties doivent être désinfectées avant utilisation avec un désinfectant de niveau élevé. Suivre le mode d'emploi du fabricant relatif au dosage et à la durée d'exposition. Le désinfectant doit répondre aux critères suivants:

- convient au nettoyage et à la désinfection des composants prothétiques dentaires
- compatible avec les matériaux des produits à nettoyer et désinfecter
- efficacité prouvée en termes de désinfection

Nous recommandons l'utilisation d'une solution d'orthophthalaldéhyde (OPA) telle que Cidex® OPA Solution. Suivre strictement le mode d'emploi du fabricant.

## Instruction générale

### Modelage

Technique habituelle pour la conception des armatures. Epaisseur minimale de la cire 0.4 mm. Lors du modelage des armatures de bridges, il faut s'assurer que les liaisons interdentaires présentent une section de 6–9 mm<sup>2</sup>. Par le modelage palatin de l'armature en forme de guirlande ou d'inlay, la stabilité peut être encore augmentée. La pose d'évents et de fils de refroidissement améliore le résultat de la coulée.

### Alimentation

Utiliser des tiges de coulée en cire ( $\varnothing$  3.5 mm) en ayant recours aux systèmes d'alimentation directe ou indirecte avec barre stabilisatrice ( $\varnothing$  5 mm). Il est conseillé pour les raccords conduisant aux éléments intermédiaires un diamètre de 4 mm. Prévoir des événements (env.  $\varnothing$  1 mm) pour améliorer la qualité des coulées de couronnes ou de ponts massifs. Les maquettes en cire sont à positionner en dehors du centre thermique, c'est-à-dire à proximité de la paroi du cylindre et à env. 5 mm de son extrémité. Pour les unitaires et les ponts jusqu'à 3 éléments, il est recommandé d'utiliser des volants en cire qui permettent d'obtenir un positionnement idéal dans le cylindre et par conséquent un refroidissement approprié des pièces coulées.

### Mise en revêtement

Tapisser l'intérieur du cylindre métallique avec du papier ignifugé (substitut à l'amiante).

Les masses de revêtement suivantes de Cendres + Métaux conviennent à ce type d'alliage :

**uniVest Plus** : masse de revêtement universelle à liant phosphate, exempte de graphite et de plâtre

**uniVest Rapid** : masse de revêtement exempte de graphite et à liant phosphate

Les revêtements liés à base de plâtre sont interdits !

**Technique de préchauffage rapide** : l'utilisation d'éléments de résine calcinables peut entraîner l'apparition de fêlures dans la masse de revêtement.

### Préchauffage

Se référer aux recommandations du fabricant du revêtement (temps de prise, paliers de chauffe, etc.). La température de préchauffage doit être stabilisée, selon la grandeur du cylindre, entre 20 et 45 minutes.

### Réutilisation de l'alliage

Seules les masselottes et les tiges de coulée parfaitement nettoyées par projection d'oxyde d'aluminium peuvent être refondues en y ajoutant  $\frac{1}{3}$  d'alliage neuf.

### Fonte

Fondre l'alliage avec les équipements habituels pour ce type d'alliage. Lors de la fonte à la flamme le réglage précis des pressions propane (env. 0.5 bar) / oxygène (env. 1.0 bar) est essentiel pour obtenir une flamme neutre (éviter l'excès de gaz). Saupoudrer l'alliage d'une petite prise de flux avant la fonte.

Flux : acide borique

### Etat de surface des coulées

Après la finition et le polissage, la surface des coulées doit être exempte de porosités pour éviter une corrosion.

### Refroidissement des coulées

Après la coulée, les cylindres doivent refroidir lentement jusqu'à la température ambiante. Ne pas les plonger dans l'eau.

### Dégrossissage

Dégrossir les éléments en enlevant une légère couche avec des fraises extra-fines à denture étagée ou croisée. Le dégrossissage peut également s'effectuer avec des meulettes, ceci à basse vitesse.

### Brasage

Nous recommandons de braser avec un chalumeau propane/oxygène et Pâte à braser CM. Des lunettes à verres fumés permettent d'obtenir un meilleur contrôle du brasage. Confectionner le modèle à braser de manière à assurer une bonne stabilité. Un espace pour le joint du brasage de 0.1 – 0.2 mm avec des parois les plus parallèles possibles renforce la bonne qualité du joint.

### Décapage

Après la cuisson ou le brasage, décaper dans une solution propre et chaude d'acide sulfurique ( $H_2SO_4$ ) à 10 % vol. Avis : Si vous utilisez d'autres produits de décapage, les recommandations des producteurs respectifs sont à respecter.

### Traitement thermique facultatif

Après la coulée, quelques alliages céramo-métalliques à haute teneur en or ne présentent pas encore leurs propriétés mécaniques maximales. Pour la réalisation des bridges de longues portées et pour les travaux avec des attachements à résine calcifiable qui ne reçoivent pas de recouvrement esthétique avec céramique, il y a cependant possibilité de faire subir une simulation de cuisson à l'armature brute de coulée dans le four à céramique. (l'armature doit être propre, les tiges de coulée non sectionnées). Ce traitement thermique supplémentaire apporte les avantages suivants : Par l'augmentation de la dureté, les armatures se laissent dégrossir plus facilement et plus rapidement. Le meulage du métal est plus propre. Les tensions éventuelles survenues pendant la solidification peuvent être ainsi éliminées. (Voir tableau du mode d'emploi au verso).

### Utilisation de dorure sur les armatures













Ces procédés sont laissés à l'entière responsabilité des utilisateurs.

### Polissage

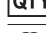Après la dernière cuisson, les surfaces métalliques visibles doivent être polies et brillantées pour éliminer totalement la couche d'oxyde.




Liste de produits		N° cat.	
Couleur	Alliages	10 g	25 g
	<b>V-Gnathos Plus</b>	01000223	01000224
	<b>Estetico<sup>®</sup> Ideal H</b>	01000265	01000266
	<b>Estetico<sup>®</sup> Lumina PF</b>	01000254	01000255
	<b>Estetico<sup>®</sup> Avenir</b>	01000246	01000247
	<b>Estetico<sup>®</sup> Cosmor H</b>	01000235	01000236
	<b>Estetico<sup>®</sup> Special</b>	01000233	01000234
	<b>Estetico<sup>®</sup> Prestige</b>	01000257	01000258
	<b>V-Classic</b>	01000220	01000221
	<b>Estetico<sup>®</sup> Implant 76</b>	01000259	01000260

### Marquages sur l'emballage/symboles

	Date de fabrication
	Fabricant
	Numéro de catalogue
	Numéro de lot
	Quantité
 <a href="http://www.cmsa.ch/docs">www.cmsa.ch/docs</a>	Prière de suivre le mode d'emploi, disponible sous forme électronique à l'adresse indiquée.
Rx only	Attention : selon la loi fédérale des États-Unis, ce produit ne peut être vendu qu'à des professionnels de la santé autorisés ou sur leur ordonnance.
	Les produits Cendres+Métaux avec le sigle CE sont conformes aux exigences européennes.
 	Identifiant unique de dispositifs médicaux (Unique Device Identification) – IUD
	Mandataire européen
	Importateur en UE
	Dispositif médical

## Consignes d'utilisation

Alliages	Indication						Composition %														
	a	b	c	d	e	f	Au + Pt Au + Pt groupe de mét.	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Ru	Rh	Fe	Autres
V-Gnathos Plus		■	■	■	■		97.85	85.90	11.70					1.50	0.10		0.05		0.20	0.05	Mn 0.10, Nb 0.40
Esteticor® Ideal H	■	■	■	■	■		97.00	85.50	9.90	1.50	0.40	0.80		0.50	1.10		0.10			0.20	
Esteticor® Lumina PF	■	■	■	■	■		98.00	84.50	13.30					1.90			0.10		0.10	0.10	
Esteticor® Avenir	■	■	■	■	■		97.40	84.00	10.90	2.40	0.20			2.20			0.10			0.20	
Esteticor® Cosmor H	■	■	■	■	■		96.50	78.50	10.00	7.80					3.50		0.20				
Esteticor® Special	■	■	■	■	■		96.10	77.30	9.80	8.90	1.20	0.30	0.50		1.50		0.10			0.20	Re 0.20
Esteticor® Prestige	■	■	■	■	■		94.00	75.10		18.85	1.00	0.50	2.00	0.50	2.00		0.05				
V-Classic		■	■	■	■		94.06	75.00		19.00	1.00	0.44	2.00	0.50	2.00		0.01	0.05			
Esteticor® Implant 76		■	■	■	■		96.90	76.80	1.35	18.60			2.90	0.20			0.15				

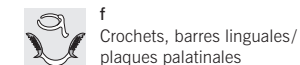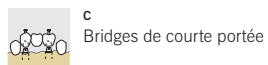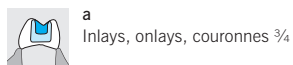

Alliages	Propriétés physiques					Propriétés mécaniques							
	CET   10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		Densité g/cm <sup>3</sup>	Intervalle de fusion °C	Module d'élasticité GPa	Dureté HV5		Limite d'élasticité à 0.2 % MPa		Résistance à la traction (Rm) MPa		Allongement à la rupture A5 %	
	(25-500 °C)	(25-600 °C)				Après coulée	Après cuisson	Après coulée	Après cuisson	Après coulée	Après cuisson	Après coulée	Après cuisson
V-Gnathos Plus	14.3	14.5	18.8	1025-1190	80	185	215		530		610		6
Esteticor® Ideal H	14.5	14.7	18.4	1045-1170	90	160	195		500		615		12
Esteticor® Lumina PF	14.2	14.6	18.9	1045-1205	90	205	230		640		715		5
Esteticor® Avenir	14.2	14.6	18.7	1055-1185	100	205	240		670		755		6
Esteticor® Cosmor H	13.8	14.0	17.9	1120-1280	100	195	215		565		705		13
Esteticor® Special	13.7	13.9	17.7	1160-1275	110	185	200		490		635		8
Esteticor® Prestige	14.0	14.3	16.4	1120-1250	115	210	230		520		680		12
V-Classic	14.0	14.3	16.4	1135-1270	105	220	250		565		735		15
Esteticor® Implant 76	13.7	13.9	16.9	1165-1290	115	205	235		630		785		10

Alliages	Brasures				Fil pour soudage laser	Mode d'emploi		
	Avant cuisson		Après cuisson			Préchauffage °C	Creusets	Température de coulée °C
V-Gnathos Plus	S.G 1030		S.G 750		LW N° 1	750	②	1390
Estetico® Ideal H	S.G 1030		S.G 810	S.G 750	LW N° 1	800	① ② ③	1270–1320
Estetico® Lumina PF	S.G 975	S.G 1030		S.G 750	LW N° 1	800	① ② ③	1305–1355
Estetico® Avenir	S.G 1030		S.G 810	S.G 750	LW N° 1	800	① ② ③	1285–1335
Estetico® Cosmor H	S.G 1080		S.G 810	S.G 750	LW N° 2	850	① ② ③	1380–1420
Estetico® Special	S.G 1080		S.G 810	S.G 750	LW N° 3	850	① ② ③	1410–1440
Estetico® Prestige	S.G 1080		S.G 810	S.G 750	LW N° 2	850	② ③	1390–1420
V-Classic	S.W 1125		S.G 750		LW N° 2	850	① ② ③	1420–1450
Estetico® Implant 76	S.G 1055	S.G 1030	S.G 750		LW N° 3	850	② ③	1390–1440

① = Creusets en graphite ② = Creusets réfractaires ③ = Creusets en carbone vitreux

Alliages	Systèmes de coulée recommandés (sans engagement)								
	Flamme propane/ oxygène  Durée de maintien de chauffe 5–10 s	Vacuum-pression avec four électrique à résistance  Durée de maintien de chauffe 40–60 s	Coulée centrifuge avec four électrique à résistance  Durée de maintien de chauffe 40–60 s	Induction à haute fréquence atmos- phérique  Durée de maintien de chauffe 5–10 s	Induction à haute fréquence sous gas protecteur  Durée de maintien de chauffe 5–10 s	Traitement thermique facultatif des armatures avant dégrossissage	Recuire	Durcir	Dégrossissage des surfaces d'armatures avec meulettes abrasives à base de liant céramique
V-Gnathos Plus	✓	✓	✓	✓	✓		900°C / 15 min / H <sub>2</sub> O	450°C / 15 min / air*	✓
Estetico® Ideal H	✓	✓	✓	✓	✓	950°C / 10 min / air	900°C / 15 min / H <sub>2</sub> O	550°C / 15 min / air*	✓
Estetico® Lumina PF	✓	✓	✓	✓	✓		900°C / 15 min / air	500°C / 15 min / air**/*	✓
Estetico® Avenir	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Estetico® Cosmor H	✓			✓	✓	950°C / 10 min / air	900°C / 15 min / H <sub>2</sub> O	550°C / 15 min / air*	✓
Estetico® Special	✓			✓	✓	950°C / 10 min / air	900°C / 15 min / H <sub>2</sub> O	600°C / 15 min / air*	✓
Estetico® Prestige	✓			✓	✓	950°C / 10 min / air	900°C / 15 min / H <sub>2</sub> O	550°C / 15 min / air*	✓
V-Classic	✓			✓	✓		900°C / 15 min / H <sub>2</sub> O	550°C / 15 min / air*	✓
Estetico® Implant 76	✓	✓	✓	✓	✓	600°C / 15 min / air			✓

\* Recuire avant durcissement


\*\* Si cuisson/brasage < 820 °C

Alliages	Sablage avec oxide d'aluminium (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 50µm non recyclé	Nettoyage avec jet de vapeur	Cuisson d'oxidation		Décapage après cuisson d'oxidation dans acide sulfurique (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) chaud et propre à 10% vol.	Sablage après cuisson d'oxidation avec oxide d'aluminium non recyclé (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 50µm
			sous vide	sans vide		
V-Gnathos Plus	✓	✓	950°C / 10 min		✓	
Esteticor® Ideal H	✓	✓	960°C / 5 min		✓	
Esteticor® Lumina PF	✓	✓	900°C / 10 min		✓	
Esteticor® Avenir	✓	✓	900°C / 10 min		✓	
Esteticor® Cosmor H	✓	✓		960°C / 5 min		
Esteticor® Special	✓	✓		960°C / 5 min		
Esteticor® Prestige	✓	✓		960°C / 5 min		✓
V-Classic	✓	✓	950°C / 10 min			
Esteticor® Implant 76	✓	✓		900°C / 10 min		

Alliages	Vitesse max. de chauffe	Revêtement céramique : phase de refroidissement suite à la cuisson					
		Céramiques < 900 °C			Céramiques > 900°C		
		Longue durée	Normal	Rapide	Longue durée	Normal	Rapide
V-Gnathos Plus	60°C / min		■			■	
Esteticor® Ideal H	60°C / min	■	■		■	■	
Esteticor® Lumina PF			■		■	■	
Esteticor® Avenir			■		■	■	
Esteticor® Cosmor H			■	■		■	■
Esteticor® Special			■	■		■	■
Esteticor® Prestige			■	■		■	
V-Classic			■			■	
Esteticor® Implant 76			■	■			■

Non contraignant, respecter aussi impérativement les instructions des fabricants de céramique !



 Cendres+Métaux SA  
Rue de Boujean 122  
CH-2501 Biel/Bienne  
Phone +41 58 360 20 00  
Fax +41 58 360 20 10  
info@cmsa.ch  
www.cmsa.ch

 Rx only  
0483